

 Direzione Operations Regionale Direzione Regionale Sicilia	Istruzione Operativa	Codice doc.:	DOR/DRSLIO.87
		Rev.:	00
	GESTIONE OPERATIVA DEL DEFIBRILLATORE SEMI- AUTOMATICO ESTERNO	Data Rev.:	28/01/2026
		Pagina: 1 di 11	

ISTRUZIONE OPERATIVA N° 87

“GESTIONE OPERATIVA DEL DEFIBRILLATORE SEMI-AUTOMATICO ESTERNO”

AMBITO DI APPLICAZIONE NEL SIGSQ				
AMBIENTE	QUALITÀ	SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	SICUREZZA DI ESERCIZIO	SOGGETTO RESPONSABILE DELLA MANUTENZIONE
		X		

DISTRIBUZIONE ☐ CONTROLLATA ☐ NON CONTROLLATA

Copia n°

Destinatario.....

00	13/01/2026	Prima Emissione	RSPP/RSQT-SSL DANIELE VACCARO	RSQT Q DIEGO FORTE	RESP MANUTENZIONE E PULIZIE SICILIA SIMONIA MIGLIAZZO	DIR PASQUALE CAMMISA
			ASPP IMC SICILIA OCC. SAMUELE FERRUZZA			
			ASPP PRODUZIONE CATERINA CALIA			
REV.	DATA EMISSION E	MOTIVO ULTIMA REVISIONE	REDAZIONE	VERIFICA	VERIFICA	APPROVAZIONE

 Direzione Operations Regionale Direzione Regionale Sicilia	Istruzione Operativa	Codice doc.:	DOR/DRSL.IO.87
		Rev.:	00
	GESTIONE OPERATIVA DEL DEFIBRILATORE SEMI- AIUTOMATICO ESTERNO	Data Rev.:	28/01/2026
		Pagina: 2 di 11	

Indice

1.	SCOPO E CONTENUTI DELLA PROCEDURA	3
2.	AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
3.	DEFINIZIONE E ABBREVIAZIONI	3
4.	RESPONSABILITÀ E RUOLI COINVOLTI	4
5.	MODALITA' OPERATIVE	4
5.1.	ADDETTO DAE	4
5.2.	DESCRIZIONE GENERALE.....	5
5.3.	PERIODICITA' DEI CONTROLLI	8
5.4.	OPERAZIONI DA ESEGUIRE DURANTE I CONTROLLI.....	8
5.5.	LISTA DI CONTROLLO	8
6.	UBICAZIONE DEFIBRILLATORE.....	9
7.	DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	10
8.	RIFERIMENTI NORMATIVI.....	10
9.	ALLEGATI.....	11

 Direzione Operations Regionale Direzione Regionale Sicilia	Istruzione Operativa	Codice doc.:	DOR/DRSI.IO.87
		Rev.:	00
	GESTIONE OPERATIVA DEL DEFIBRILATORE SEMI- AUTOMATICO ESTERNO	Data Rev.:	28/01/2026
		Pagina: 3 di 11	

1. SCOPO E CONTENUTI DELLA PROCEDURA

La presente istruzione operativa definisce ruoli, responsabilità e modalità operative relative alla gestione e al controllo della funzionalità del **Defibrillatore Semi-Automatico Esterno** (DAE), al fine di garantire il corretto funzionamento e mantenimento in efficienza del dispositivo, secondo quanto indicato nel manuale di uso e manutenzione.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente istruzione si applica agli Impianti della S.O. Manutenzione e Pulizie della Direzione Regionale Sicilia all'interno dei quali è presente il DAE.

La presente Istruzione Operativa è distribuita in maniera controllata al personale formalmente incaricato ai controlli operativi dell'apparecchiatura (Addetto al controllo della funzionalità del DAE), nonché alle figure individuate per la corretta gestione operativa del DAE.

3. DEFINIZIONE E ABBREVIAZIONI

DOR	Direzione Operations Regionale
DRSI	Direzione Regionale Sicilia
DdL	Datore di Lavoro
DdL Delegato	Datore di Lavoro Delegato
CTGT	Capo Tecnico Gestore Treno
CT MAN	Capo Tecnico Manutenzione
DAE	Defibrillatore Semi-Automatico Esterno
IMC	Impianto di Manutenzione Corrente
IO	Istruzione Operativa
SO	Struttura Operativa
RI	Responsabile di Impianto
RSPP	Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
ASPP	Addetto Servizio di Prevenzione e Protezione
BLSD	Basic Life Support Defibrillation

 Direzione Operations Regionale Direzione Regionale Sicilia	Istruzione Operativa	Codice doc.:	DOR/DRSLIO.87
		Rev.:	00
	GESTIONE OPERATIVA DEL DEFIBRILATORE SEMI- AUTOMATICO ESTERNO	Data Rev.:	28/01/2026
		Pagina: 4 di 11	

4. RESPONSABILITÀ E RUOLI COINVOLTI

Attività/Funzione	Ddl/ Delegato DdL	Resp. Impianto	RSPP	Addetto al controllo	Resp. Acquisti IMC
Nomina Addetto al controllo della funzionalità del DAE	R	C	I	C	
Ubicazione DAE	R	C	I	I	
Comunicazione stato DAE agli Enti preposti	C	I	R		
Acquisto ricambi		R			C
Reintegro d'urgenza		R			C
Segnalazione carenze		C		R	I
Segnalazione di avaria DAE	I	C	I	R	

R Soggetto responsabile dell'attività/funzione

C Soggetto coinvolto nell'attività/funzione

I Soggetto informato dell'attività/funzione

5. MODALITA' OPERATIVE

L'utilizzo del DAE è devoluto esclusivamente al personale che ha ricevuto la formazione BLSD ai sensi della Legge 3 aprile 2001 n. 120 e della Legge 116/2021 o da personale non sanitario e non abilitato, ma guidato con istruzioni vocali da personale del 118 o qualificato. Quest'ultimo presupposto è applicabile qualora le condizioni del soccorso siano impossibilitate da personale sanitario o formato attraverso corso BLSD. L'elenco del personale della DR Sicilia che ha ricevuto tale formazione è tenuto sotto controllo dall'RSPP, che ne verifica anche il mantenimento delle competenze e l'eventuale necessità degli aggiornamenti biennali. Gli utilizzatori del DAE sono formalmente nominati dal DL/DL delegato. In caso di utilizzo del DAE, alla fine dell'intervento, deve essere fatta comunicazione, immediatamente, all'RSPP e proprio RdI, descrivendo brevemente l'accaduto.

5.1. ADDETTO DAE


Il Datore di Lavoro Delegato, su indicazione dei Responsabili d'Impianto, individua e nomina formalmente l'Addetto al controllo della funzionalità del DAE ed eventualmente i suoi sostituti, per garantire la continuità delle operazioni di mantenimento in efficienza del dispositivo come indicato nella presente IO. L'Addetto al controllo nominato dovrà seguire quanto riportato nel manuale d'uso e manutenzione (All. 3) del DAE e nella presente Istruzione Operativa. Dovrà inoltre comunicare tempestivamente al RSPP e al proprio RdI ogni variazione rispetto all'efficienza del dispositivo e alla sostituzione della componentistica guasta/degradata o nel caso della batteria se è prossima alla scadenza o scaduta.

 Direzione Operations Regionale Direzione Regionale Sicilia	Istruzione Operativa	Codice doc.:	DOR/DRSL.IO.87
		Rev.:	00
	GESTIONE OPERATIVA DEL DEFIBRILATORE SEMI- AUTOMATICO ESTERNO	Data Rev.:	28/01/2026
		Pagina: 5 di 11	


5.2. DESCRIZIONE GENERALE

Di seguito una serie di figure, sotto illustrate, mostrano in maniera esaustiva i diversi componenti dell'apparecchio, incluso etichette e loro significato, che fanno parte del dispositivo DAE:

Componenti del pannello superiore e destro

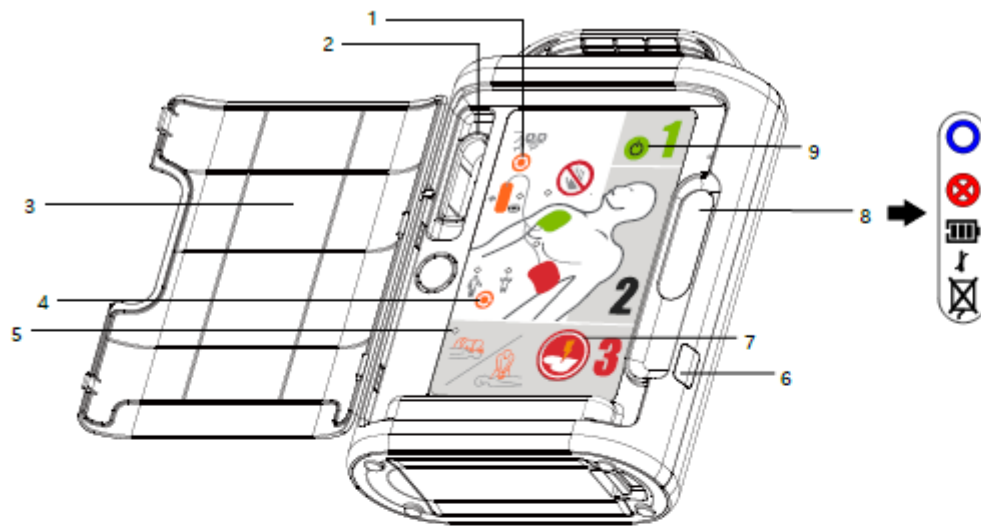

<Tipo di torace- A16-DS, A16-DF>

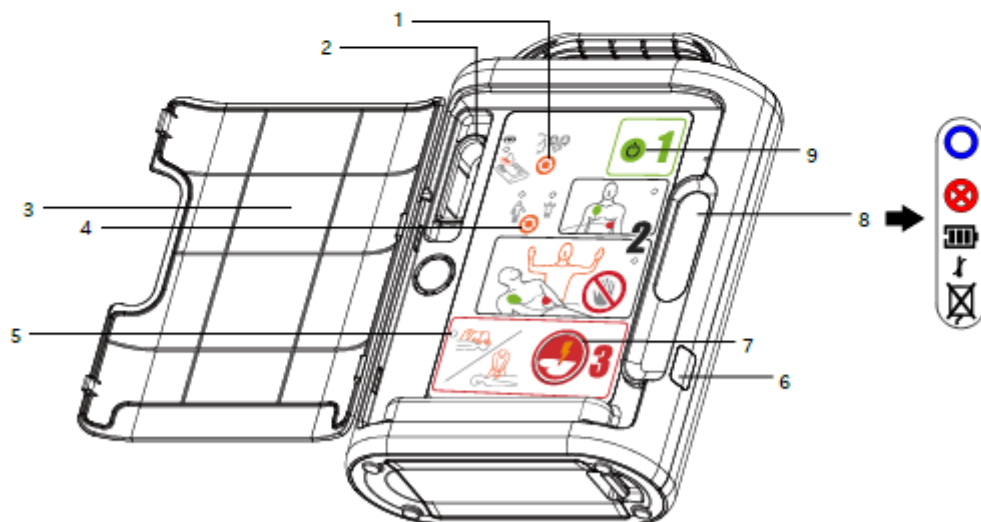

<Tipo di icona - A16-GS, A16-GF>

Figura 1. Tecnoheart Smart: Componenti del pannello superiore e destro

 Direzione Operations Regionale Direzione Regionale Sicilia	Istruzione Operativa	Codice doc.:	DOR/DRSI.IO.87
		Rev.:	00
	GESTIONE OPERATIVA DEL DEFIBRILATORE SEMI- AUTOMATICO ESTERNO	Data Rev.:	28/01/2026
		Pagina: 6 di 11	

Componenti del pannello posteriore

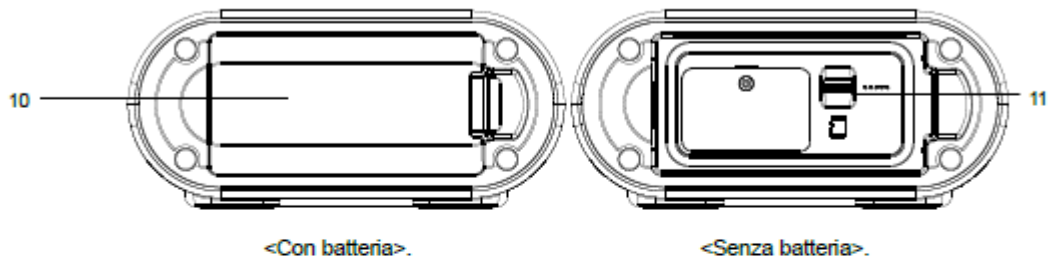


Figura 2. Tecnoheart Smart: Componenti del pannello posteriore

Tabella 1. Tecnoheart Smart Componenti del pannello

1	Pulsante di selezione della lingua	L'utilizzatore può selezionare la lingua desiderata fra le tre disponibili premendo il relativo pulsante.
2	Connettore degli elettrodi	Il connettore degli elettrodi serve a collegare gli elettrodi.
3	Coperchio	Il coperchio serve a proteggere le icone di azione, il pulsante della modalità paziente, pulsante di accensione, il pulsante di selezione della lingua e il pulsante di scarica.
4	Interruttore della modalità paziente	Dopo aver identificato il paziente in base al tipo, selezionare la modalità paziente tra adulto e pediatrico utilizzando il relativo interruttore.
5	Indicatore a LED	L'indicatore a LED rosso lampeggia sotto l'icona dell'azione corrispondente.
6	Porta di comunicazione a infrarossi	La porta di comunicazione a infrarossi serve a comunicare con il PC e l'INS del DAE (soluzione di rete).
7	Pulsante di scarica (Solo semi-automatico)	Una volta completata la preparazione per la scarica elettrica, il pulsante di scarica lampeggerà. Premere il pulsante di Scarica per erogare la scarica elettrica.
8	Indicatore di stato	L'indicatore di stato indica lo stato del DAE, la temperatura e il livello della batteria.
9	Pulsante di accensione	Il pulsante di accensione è usato per accendere/spegnere l'apparecchio.
10	Batteria	L'utilizzatore può rimuovere o riposizionare la batteria.
11	Slot per scheda SD	La scheda SD serve per salvare i dati e aggiornare il software del DAE.

 Direzione Operations Regionale Direzione Regionale Sicilia	Istruzione Operativa	Codice doc.:	DOR/DRSLIO.87
		Rev.:	00
	GESTIONE OPERATIVA DEL DEFIBRILATORE SEMI- AUTOMATICO ESTERNO	Data Rev.:	28/01/2026
		Pagina: 7 di 11	

Simboli ed etichette

I seguenti simboli possono essere utilizzati nel presente manuale, nella relativa documentazione, o comparire sui componenti o imballi del sistema.

Tabella 2. Simboli del pannello e delle etichette

Simboli	Descrizione	Simboli	Descrizione
	Pronto all'uso		Dispositivo esclusivamente monouso
	Non pronto all'uso		Marchio CE
	Stato della Batteria		Limitazioni ambientali di altitudine per trasporto/magazzinaggio
	Stato della temperatura		Limitazioni ambientali di umidità per trasporto/magazzinaggio
	Non contiene lattice		Limitazioni ambientali di temperatura per trasporto/magazzinaggio
	Utilizzare entro		Fragile-maneggiare con cura
	Seguire le istruzioni per l'uso		Questo lato verso l'alto
	Produttore		Mantenere asciutto
	Data di produzione		Tipo CF – A tenuta di defibrillatore
REF	Riferimento n.	IP55	Resistenza all'acqua e alla polvere
SN	Numero di serie		Istruzioni per lo smaltimento
	Stato degli elettrodi		

 Direzione Operations Regionale Direzione Regionale Sicilia	Istruzione Operativa	Codice doc.:	DOR/DRSLIO.87
		Rev.:	00
	GESTIONE OPERATIVA DEL DEFIBRILATORE SEMI-AUTOMATICO ESTERNO	Data Rev.:	28/01/2026
		Pagina: 8 di 11	

5.3. PERIODICITA' DEI CONTROLLI

Il DAE necessita di controlli periodici per il mantenimento in efficienza, con cadenza **giornaliera, settimanale e mensile e dopo ogni uso.**

5.4. OPERAZIONI DA ESEGUIRE DURANTE I CONTROLLI

È fatto obbligo di eseguire i controlli giornalieri (secondo all. 1 Lista di Controllo operatore), settimanali e mensili (secondo all. 2 Lista di Controllo operatore).

Il controllo giornaliero è effettuato da personale in turno h24 nella figura dei CT gestori treno (coordinatori alle emergenze), mentre i controlli settimanali e mensili sono eseguiti da addetto opportunamente individuato e formato. Tali figure sono operanti all'interno dell'impianto ove si trova ubicato il DAE e formalmente nominati secondo il format di nomina operatore controlli (all.4).

Di seguito i controlli periodici previsti secondo il manuale di uso e manutenzione del dispositivo DAE:

- Controllare l'indicatore di Stato del DAE (componente n.8 rappresentato in Figura 1 Manuale uso e manutenzione). Il Display mostra:
 - lo stato del dispositivo (la X indica un problema che è possibile consultare nella sezione relativa alla risoluzione problemi del manuale d'uso e manutenzione (all.3);
 - La temperatura. Le condizioni ambientali per conservazione e funzionamento devono rientra all'interno del range 0°÷43°.
 - Il livello batteria (la carica comprende tre tacche (carica massima). La data di scadenza della stessa prevede, nella confezione originale, 2 anni dalla data di produzione, mentre la durata in standby (inserita nel DAE) è di 5 anni dalla data di produzione.
- Controllare la presenza di danni meccanici o funzionali al dispositivo;
- Controllare che le etichette esterne di sicurezza siano leggibili;

Per quanto attiene alla pulizia del DAE, attenersi a quanto di seguito indicato e riportato sul manuale di uso e manutenzione:

- Pulire il DAE con un panno morbido inumidito con una delle seguenti sostanze:
 - Ammonio quaternario (fungicida, battericida e virucida contro i virus avvolti);
 - Alcol isopropilico (soluzione al 70%);
 - Soluzione di candeggina al 10% di cloro.

Per la pulizia dei cavi e degli elettrodi, seguire le istruzioni indicate nel manuale.

Evitare di versare liquidi sul DAE, soprattutto nelle zone dei connettori. Se accidentalmente vengono versati liquidi sul DAE, pulire e asciugare accuratamente prima di riutilizzarlo. Se si hanno dei dubbi sulla sicurezza del DAE, consultare il personale qualificato o il proprio fornitore locale per la verifica.

5.5. LISTA DI CONTROLLO

Informazione ad uso interno – Internal use information

 Direzione Operations Regionale Direzione Regionale Sicilia	Istruzione Operativa	Codice doc.:	DOR/DRSL.IO.87
		Rev.:	00
	GESTIONE OPERATIVA DEL DEFIBRILATORE SEMI- AIUTOMATICO ESTERNO	Data Rev.:	28/01/2026
		Pagina: 9 di 11	

Gli operatori addetti al controllo della manutenzione formalmente nominati dovranno dare evidenza delle operazioni indicate nel precedente paragrafo, compilando la lista di controllo (all. 1 e all. 2 alla presente IO). In caso di anomalie, dovranno indicare, nella colonna “esito controllo”, **KO**, descrivendo altresì nella sezione “Note” quanto rilevato e successivamente avvisare il RdI per il ripristino/messa fuori servizio del DAE e il RSPP per il seguito di competenza.

6. UBICAZIONE DEFIBRILLATORE

Il Datore di Lavoro ha stabilito la collocazione del DAE nell’impianto della S.O. Manutenzione e Pulizie Sicilia, indicando, anche la dotazione della cassetta contenente il dispositivo.

La cassetta DAE dovrà contenere:

- Dispositivo DAE
- Mascherina per rianimazione
- Forbici adeguate al taglio degli indumenti
- Pacco di garze sterili

 Direzione Operations Regionale Direzione Regionale Sicilia	Istruzione Operativa	Codice doc.:	DOR/DRSL.IO.87
		Rev.:	00
	GESTIONE OPERATIVA DEL DEFIBRILATORE SEMI- AIUTOMATICO ESTERNO	Data Rev.:	28/01/2026
		Pagina: 11 di 11	

9. ALLEGATI

- Allegato 1: Lista di Controllo Operatore con periodicità giornaliera;
- Allegato 2: Lista di Controllo Operatore con periodicità, settimanale e mensile;
- Allegato 3: Manuale d'uso modello DAE;
- Allegato 4: Format nomina operatore controlli.